



fumagalli
WE TAKE CARE

Linea Shifu
Air, Earth, Ocean
Stabilizzatore
posturale

SHIFU

***"Non importa la tua storia..
l'importante è quello che tu scegli di essere ora"***

Tratto da ***Kung Fu Panda***, film d'animazione
DreamWorks Animation del 2008.

Come il Maestro Shifu ha aiutato Po a diventare l'eroe
guerriero, la linea Shifu si compone di 3 Maestri che
consentiranno al bambino di prendere consapevolezza
gradualmente del suo corpo, per essere fiero verso
tutti i suoi nemici.

SHIFU



SHIFU

Shifu Serie di tavoli
per statica prona,
supina o prono/supina,
con telai stabili ed
estremamente funzionali





Linea di stabilizzatori posturali progettata in tre modelli, per statica supina, per statica prona e per statica supina/prona, realizzati in diverse misure per adattarsi alle esigenze di ragazzi ed adulti.

Tutti i modelli sono realizzati con telaio leggero, estremamente maneggevole e con dimensioni ridotte per poter essere utilizzato anche in ambienti stretti o riposto facilmente quando non in uso, grazie anche alle pratiche ruote piroettanti dotate di freno; inoltre la particolare sagomatura della base permette all'assistente di avvicinarsi alla persona o di avvicinare al massimo lo stabilizzatore al letto o alla carrozzina senza intralciare. Ogni stabilizzatore ha piano di appoggio per il corpo imbottito, regolabile gradualmente in inclinazione, da orizzontale a verticale, e in lunghezza per adattarsi alle dimensioni della persona, e la pedana per i piedi è regolabile in altezza, divaricazione dei piedi, intra/extra rotazione e flessione/estensione.

Ogni modello può essere personalizzato con i diversi

accessori della Linea, come le cinghie per il fissaggio di tronco, bacino e ginocchia, che permettono di adattare lo stabilizzatore ai bisogni del riabilitatore e della persona, seguendone l'evoluzione, aumentando la sicurezza e favorendo così il percorso riabilitativo.

I tre modelli, SHIFU AIR per statica SUPINA, SHIFU EARTH per statica PRONA e SHIFU OCEAN per statica SUPINA e PRONA, nella misura 3, per adulti, hanno la regolazione dell'inclinazione a mezzo motore elettrico a bassa tensione, con pulsantiera a distanza che consente all'utilizzatore di variare la propria posizione anche autonomamente.

Pur essendo concepiti per un uso professionale, la facilità d'uso e le dimensioni contenute ne facilitano l'utilizzo anche domestico.



TARGET

SHIFU è il classico piano da statica per la stazione eretta, indicato in tutti quei casi ove la scarsità o assenza del controllo del capo e del tronco non consentono l'utilizzo di ausili quali Robin o X-Tend.

Il morbido piano imbottito permette al bambino di essere posizionato supino o prono, a seconda delle ca-

pacità e/o degli obiettivi che vengono posti: la possibilità dell'inclinazione graduale, consente una gestione precisa dell'acquisizione della stazione eretta, subordinata alla capacità del bambino di sopportare un carico sempre maggiore sugli arti inferiori. La gradualità del carico è riconosciuto come elemento determinante per miglora-

re, anche nei quadri patologici molto compromessi, diverse funzioni vitali quali la ventilazione e la pervietà polmonare, la digestione e l'attività peristaltica, l'apposizione di tessuto osseo sulle ossa lunghe evitando il rischio di osteoporosi.



SHIFU



SHIFU AIR STABILIZZATORE PER STATICA SUPINA

Ha piano imbottito per l'appoggio del corpo, con regolazione graduale dell'inclinazione da orizzontale a verticale, ed è dotato di cinghie con cuscinetti imbottiti per il fissaggio di tronco/bacino e ginocchia, e di tavolino inclinabile per l'appoggio dell'arto superiore, posizionabile a diverse altezze.

Il piano ha appoggio per il capo indipendente, regolabile in altezza, e pedane poggipiedi regolabili in altezza, divaricazione, intra/extra rotazione e flessione dorsale/plantare.

La base di appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, tutte dotate di freno.

Realizzato in tre misure:

MISURA PICCOLA: dotato di piano d'appoggio per arti superiori in legno, per bambini sino a cm 130 di altezza;

MISURA MEDIA: dotato di piano d'appoggio per arti superiori in legno, per ragazzi sino a cm 160 di altezza;

MISURA GRANDE: con piano d'appoggio per arti superiori in legno, per adulti, ha regolazione dell'inclinazione, da orizzontale a verticale servoassistita da motore elettrico per consentire di variare l'inclinazione in modo indipendente.



SHIFU EARTH STABILIZZATORE PER STATICA PRONA

Ha piano imbottito per l'appoggio del corpo, con regolazione graduale dell'inclinazione da orizzontale a verticale. Viene fornito con una coppia di sostegni per tronco, regolabili in altezza, un divaricatore, una cinghia con cuscinetto imbottito per il contenimento del tronco e, a richiesta, una spinta lombo sacrale per mantenere la persona in posizione corretta verso il piano.

Il piano ha pedane poggipiedi regolabili in altezza, divaricazione, intra/extra rotazione e flessione dorsale/plantare.

La base d'appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, tutte dotate di freno.

Realizzato in tre misure:

MISURA PICCOLA: per bambini sino a cm 130 di altezza;

MISURA MEDIA: per ragazzi sino a cm 160 di altezza;

MISURA GRANDE: per adulti oltre cm 160 di altezza, con regolazione dell'inclinazione da orizzontale a verticale servoassistita da motore elettrico, per consentire all'utilizzatore di variare l'inclinazione senza aiuti esterni.



SHIFU OCEAN STABILIZZATORE PER STATICA PRONA/SUPINA

Ha piano imbottito per l'appoggio del corpo, con regolazione graduale dell'inclinazione da orizzontale a verticale, ed è dotato di cinghie con cuscinetti imbottiti per il fissaggio di tronco/bacino e ginocchia, e di tavolino inclinabile per l'appoggio dell'arto superiore, posizionabile a diverse altezze.

Il piano di appoggio per il corpo è realizzato in modo da consentire la regolazione della sua estensione, e potersi così adattare sia alla posizione supina che alla

posizione prona.

Quando utilizzato in posizione supina, il piano ha appoggio per il capo indipendente, regolabile in altezza, e pedane poggiapiedi regolabili in altezza, divaricazione, intra/extra rotazione e flessione dorsale/plantare.

Viene fornito completo anche degli accessori di base necessari per la postura prona, quali il divaricatore, regolabile in altezza e, a richiesta, il supporto di contenimento bacino, regolabile in altezza, in senso antero-posteriore e latero-laterale

La base di appoggio a terra ha quattro ruote piroettanti, tutte dotate di freno.


Realizzato in tre misure:

MISURA PICCOLA: per bambini sino a cm 130 di altezza;

MISURA MEDIA: per ragazzi sino a cm 160 di altezza;


MISURA GRANDE: per adulti oltre cm 160 di altezza, con regolazione dell'inclinazione da orizzontale a verticale servoassistita da motore elettrico, per consentire all'utilizzatore di variare l'inclinazione senza aiuti esterni.

Shifu Air

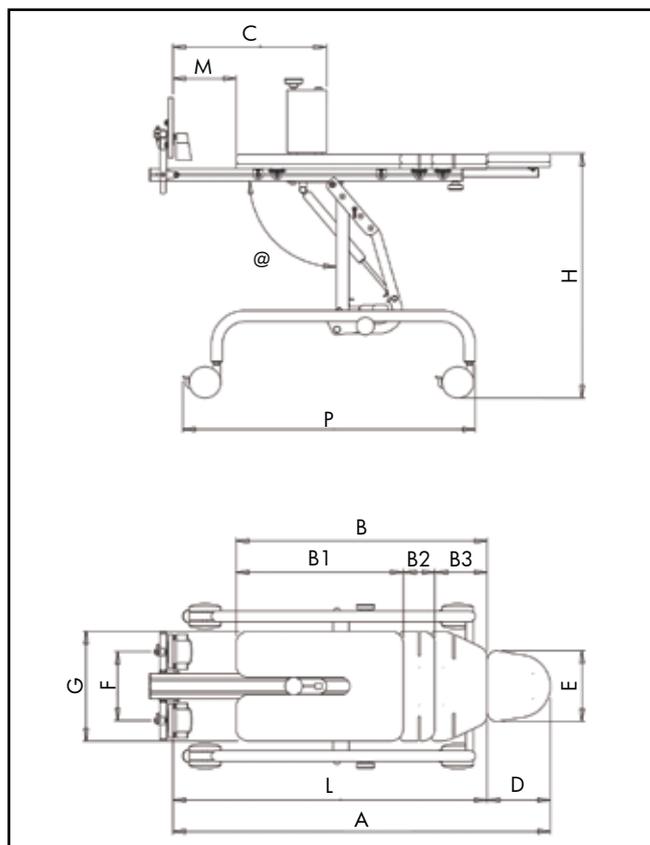


Riferimenti	Unità	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Codice prodotto		841301	841302	841303
Carico massimo ammissibile	Kg	70	90	135
A Lunghezza totale	Cm	96-130	115-160	145-195
L Lunghezza	Cm	76-110	95-140	120-170
B Lunghezza totale piano esclusa testiera	Cm	69,5-79,5	88,5-103,5	113,5-128,5
B1 Lunghezza piano inferiore	Cm	53	68	93
B2 Lunghezza estensione piano	Cm	10	15	15
B3 Lunghezza piano superiore	Cm	16,5	20,5	20,5
C Altezza del divaricatore	Cm	25-60	25-70	25-100
D Lunghezza poggiatesta	Cm	20	20	25
E Larghezza poggiatesta	Cm	22,5	22,5	30
F Regalazione poggia piedi	Cm	13-31	13-31	15-43
G Larghezza piano imbottito	Cm	35	45	60
M Altezza pedana	Cm	6-25	6-30	6-40
H Altezza del piano da terra	Cm	79	87	82
P Lunghezza del telaio	Cm	92	112	132
@ Angolo di inclinazione	° gradi	5°-95°	5°-95°	5°-92°
Raggio di sterzata	Cm	105	133	148
Peso dell'ausilio	Kg	30	45	50
Altezza utente	Cm	100-130	120-160	150-195

Shifu Earth

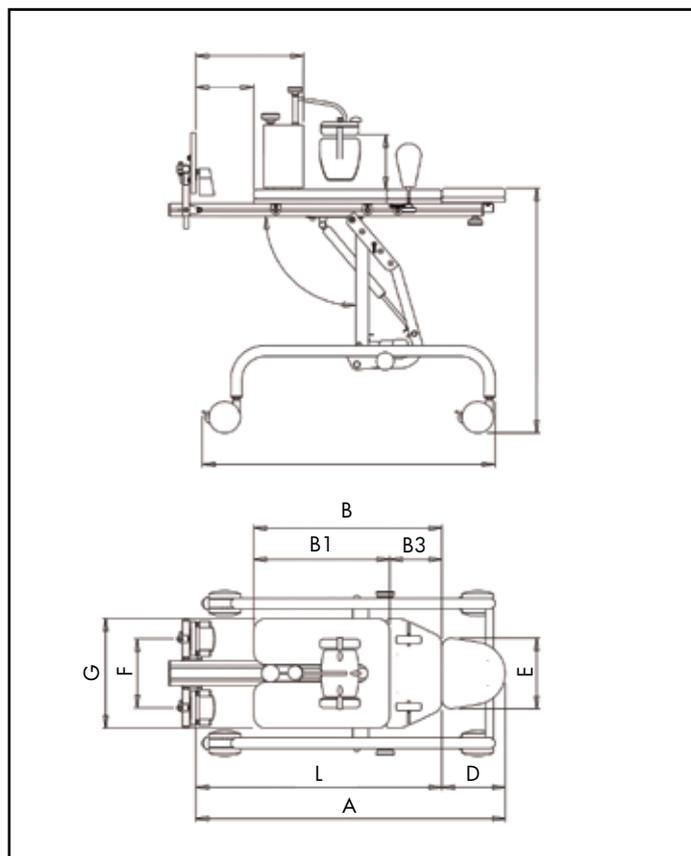


Riferimenti	Unità	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Codice prodotto		842301	842302	842303
Carico massimo ammissibile	Kg	70	90	135
A Lunghezza totale	Cm	85-105	100-126	125-155
L Lunghezza	Cm	65-87,5	79,5-105	101-129
B Lunghezza totale piano escluso testiera	Cm	59,5	73,5	83,5
B1 Lunghezza piano inferiore	Cm	43	53	63
B3 Lunghezza piano superiore	Cm	16,5	20,5	20,5
C Altezza del divaricatore	Cm	25-60	25-70	25-100
D Lunghezza poggiatesta	Cm	20	20	25
E Larghezza Poggiatesta	Cm	22,5	22,5	30
F Regolazione poggiapiedi	Cm	13-31	13-31	15-43
G Larghezza piano imbottito	Cm	35	45	60
M Altezza pedana	Cm	6-30	6-32	6-40
N Profondità spinta sacrale	Cm	11-20	11-20	17-34
H Altezza del piano da terra	Cm	79	87	82
P Lunghezza del telaio	Cm	92	112	132
@ Angolo di inclinazione	° gradi	5°-95°	5°-95°	5°-92°
Raggio di sterzata	Cm	105	133	148
Peso dell'ausilio	Kg	30	45	50
Altezza utente	Cm	100-130	120-160	150-195

Shifu Ocean

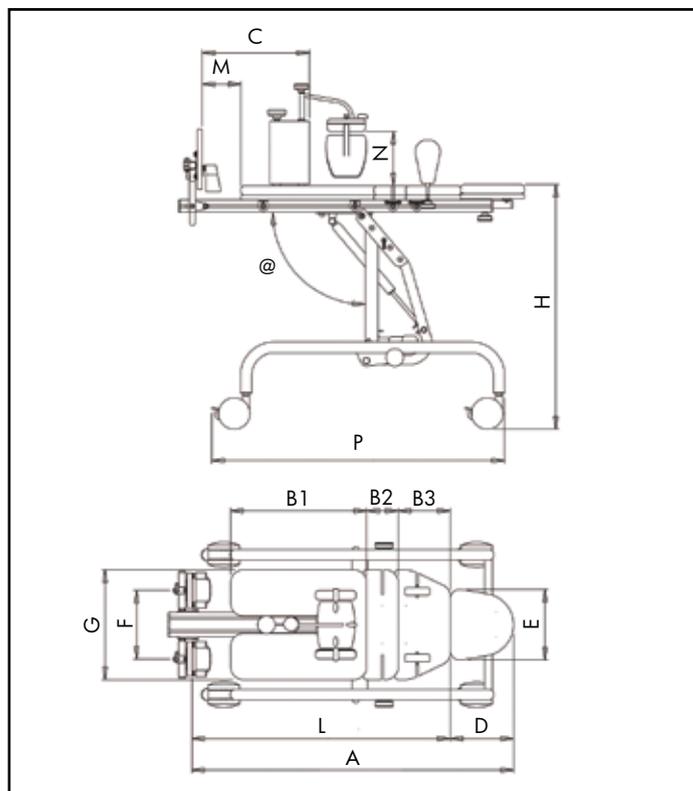

Riferimenti	Unità	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Codice prodotto		843301	843302	843303
Carico massimo ammissibile	Kg	70	90	135
A Lunghezza totale (CONFIGURAZIONE prona)	Cm	85-105	100-126	125-155
A Lunghezza totale (CONFIGURAZIONE supina)	Cm	96-130	115-160	145-195
L Lunghezza (CONFIGURAZIONE prona)	Cm	65-87,5	79,5-105	101-129
L Lunghezza (CONFIGURAZIONE supina)	Cm	76-110	95-140	120-170
B1 Lunghezza piano inferiore	Cm	43	53	63
B2 Lunghezza estensione piano	Cm	10	15	15
B3 Lunghezza piano superiore	Cm	16,5	20,5	20,5
C Altezza del divanatore	Cm	25-60	25-70	25-100
D Lunghezza poggiatesta	Cm	20	20	25
E Larghezza poggiatesta	Cm	22,5	22,5	30
F Regolazione poggipiedi	Cm	13-31	13-31	15-43
G Larghezza piano imbottito	Cm	35	45	60
M Altezza pedana *	Cm	6-30	6-32	6-40
N Profondità spinta sacrale	Cm	11-20	11-20	17-34
H Altezza del piano da terra	Cm	79	87	82
P Lunghezza del telaio	Cm	92	112	132
@ Angolo di inclinazione	° gradi	5°-95°	5°-95°	5°-92°
Raggio di sterzata	Cm	105	133	148
Peso dell'ausilio	Kg	30	45	50
Altezza utente	Cm	100-130	120-160	150-195
* Dipende dalla configurazione prona / supina				

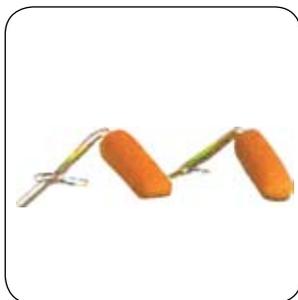

COPPIA SOSTEGNI PER LE SPALLE

Cod. 840352

MISURA UNICA

COPPIA DI STABILIZZATORI PER CLAVICOLA REGOLABILI IN ANGOLAZIONE E LARGHEZZA. ADATTO PER SHIFU AIR E SHIFU OCEAN PER IL CONTROLLO TORACICO NELLA POSIZIONE SUPINA, DURANTE IL PASSAGGIO DALLA POSIZIONE ORIZZONTALE A QUELLA VERTICALE.



ESTENSIONE PER PIANO

Cod. 840361

MISURA 1

Cod. 840362

MISURA 2

Cod. 840363

MISURA 3

PER VERSIONE PRONO-SUPINO



SOSTEGNI LATERALI PER IL TRONCO

Cod. 840315

MISURA 1 E 2

Code 840316

MISURA 3

REGOLABILI IN ALTEZZA, LARGHEZZA ED INCLINAZIONE



APPOGGIATESTA

Cod. 840381

MISURA UNICA

PER POSIZIONE SUPINA.



DIVARICATORE

Cod. 840310

VERSIONE STRETTA

Cod. 840311

VERSIONE LARGA

ADATTO PER TUTTI GLI STABILIZZATORI DELLA LINEA SHIFU.



CINTURA SEMPLICE

Cod. 840394 - CM 180

Cod. 840395 - CM 105

Cod. 840396 - CM 140

CUSCINETTO IMBOTTITO PER CINTURA

Cod. 840373 - CM 30

Cod. 840374 - CM 45



SUPPORTO CONTENIMENTO BACINO

Cod. 840312

MISURA 1 E 2

Cod. 840313

MISURA 3

ADATTO PER TUTTI GLI STABILIZZATORI DELLA LINEA SHIFU.



TAVOLINO IN LEGNO

Cod. 840391

MISURA 1

Cod. 840392

MISURA 2

Cod. 840393

MISURA 3

REGOLABILI IN ALTEZZA ED INCLINAZIONE.



SUPPORTI PER GINOCCHIA

Cod. 840397

MISURA 1

Cod. 840398

MISURA 2

Cod. 840399

MISURA 3

REGOLABILI IN ALTEZZA ED INCLINAZIONI.