

NOVITÀ



**LiteLock™**  
system

(patent pending)



## Colorato, sicuro e facile da guidare

Il nuovo *Invacare Colibri* è uno scooter compatto, veloce, colorato. Smontabile e dal design accattivante è pensato per coloro che ricercano indipendenza e stile.

Grazie all'innovativo sistema *Invacare LiteLock™*, lo scooter può essere facilmente smontato senza l'uso di attrezzi e riposto nel bagagliaio di qualsiasi auto. Le sue dimensioni ridotte garantiscono grande manovrabilità in spazi ristretti. Ecco perché *Invacare Colibri* è perfetto in tutte le situazioni!

Con un set di 5 colori intercambiabili potrai personalizzare il look del tuo scooter in qualsiasi momento.



**Yes, you can.®**



### Sistema **LiteLock** - grande facilità di smontaggio e montaggio

Il sistema **LiteLock™**, unico nel suo genere, si aziona automaticamente una volta che le batterie sono state rimosse, permettendo così di scomporre lo scooter in due parti senza l'utilizzo di attrezzi. La parte frontale può essere facilmente piegata e caricata nel bagagliaio dell'auto assieme alle altre parti. Il successivo riassetto dello scooter sarà altrettanto semplice e sicuro.

### Carenature colorate intercambiabili - resistenti e facili da cambiare

Invacare **Colibri** è uno scooter dal design accattivante grazie alle carenate colorate intercambiabili. Le carenate rimangono sempre al loro posto grazie al sistema di aggancio "Clip-on" e possono essere facilmente sostituite con altre di altri colori ogni volta che vuoi.

#### Caratteristiche e Optional



#### Facilmente smontabile

Meno di un minuto è tutto ciò che serve per smontare e caricare in auto **Invacare Colibri**.



#### Ruote più grandi e batteria più potente (optional)

Potrete percorrere distanze maggiori anche su strade accidentate e ricaricare le batterie direttamente dallo scooter o a parte.



#### Comfort ai massimi livelli

La seduta imbottita e morbida offre grande comfort di guida. Su richiesta è possibile ordinare anche il sedile ammortizzato.

#### Dati tecnici

					
<b>Invacare Colibri</b> 465 mm	400 mm	370 - 420 mm	385 mm	505 mm	
					
<b>Invacare Colibri</b> 1010 mm	44 kg <sup>2</sup> (batterie 12 Ah) 49 kg <sup>2</sup> (batterie 18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 X 18 Ah	2200 mm	<p>Invacare Meccsan s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 Thiene (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034 e-mail: italia@invacare.com www.invacare.it</p> <p>© 2014 Invacare International Sàrl All rights reserved.</p> <p>Tutte le informazioni sono aggiornate al momento si andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.</p> <p>Colibri - IT - 03/2014</p>
					
<b>Invacare Colibri</b> 40 mm <sup>3</sup> 45 mm <sup>4</sup>	6° / 10.5%	200 W	Up to 16 km	8 km/h	

#### Colori carenatura




Blu Zaffiro

Rosso Rubino

Verde Giada



Arancione

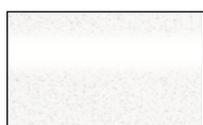

Bianco Marmo

- 1/ Conforme alla normativa RoHS2 sulla Restrizione all'uso di specifiche sostanze nocive su apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS (2011/65/EC)
- 2/ Peso dell'elemento più pesante: 15,6 kg
- 3/ con ruote piccole (200 x 50 mm)
- 4/ con ruote grandi (210 x 65 mm)



**Yes, you can.®**