

Dory

La seggiolina per TUTTI!


fumagalli
WE TAKE CARE

OltreMorbido[®]
fumagalli 



Io creo...
disegno...
imparo!



DORY, seduta per bambini!

"Me lo ricordo, lo giuro! È qui, lo so perché...
perché quando ti vedo, lo sento... e quando...
quando ti vedo... mi sento a casa."

Tratto dal film di animazione "Alla ricerca di Nemo", Pixar 2003.



Una seduta stabile e robusta con un'imbottitura morbida ricoperta da una fodera colorata, piacevole al tatto, che può essere abbinata ad un banco ampio ed altrettanto stabile oppure ad un tavolino, applicabile ai braccioli, che favoriscono le attività del bimbo: Dory è un *sistema attivo* progettato per favorire il gioco o lo studio dei bambini con bisogni speciali.

La seggiolina è stata studiata per offrire al bambino tutti gli appoggi necessari che lo fanno sentire sicuro e comodo e, di conseguenza, *lo stimolano a sviluppare le sue capacità e ad essere attivo*: a seconda dei bisogni del bambino la seduta può essere completata con supporti di contenimento a livello del torace o del bacino, con un poggia testa o una prolunga dello schienale che offre una superficie di appoggio maggiore oppure con poggia piedi di diversi modelli e cinture che, contenendo il corpo del bambino, lo fanno sentire più sicuro nello svolgere le attività con i suoi compagni.

Ogni prodotto che esce dalla nostra azienda per noi deve far *stare bene* il bambino, deve accoglierlo e seguirlo nelle sue evoluzioni e nei diversi bisogni, per questo motivo Dory offre diverse opportunità di regolazione e personalizzazione, con una gamma di accessori pensati *ad hoc*: la regolazione in altezza di seduta e banco consentono un facile e comodo accesso a tutti i tavolini mentre la regolazione di braccioli, pedana e poggia testa permette di dare i giusti supporti, i diversi accessori aiutano il bambino a sentirsi sicuro e le routine... aiutano la maestra a spostare il bimbo!

La seduta è prodotta in 2 misure, che coprono un range di età dai 4 ai 12 anni di età.

*Tutti a scuola con un'amica speciale:
porta Dory nella tua classe!*

Dettagli che fanno... la differenza!



Schienale e seduta sono già predisposti per l'**aggancio delle cinture di contenimento** al telaio (tramite le asole in acciaio), che possono anche essere direttamente fissate sulla struttura con le fibbie a sportello fornite in dotazione. La struttura offre anche la predisposizione per l'aggancio di poggia testa e pelotte toracali.

Con il
volantino
di sicurezza
non puoi
sbagliare!



Sistema di regolazione pratico e veloce per l'altezza di seduta, braccioli e tavolino. In particolare, la regolazione dell'altezza della seduta è dotata anche di sistema di sicurezza che impedisce variazioni accidentali.



Semplicissima
da regolare!

Quando si sceglie di completare Dory con gli accessori, la **regolazione** delle pelotte toracali e dei fianchetti per il contenimento del bacino sono facilmente effettuabili con il bambino seduto.

Il telaio della seggiolina è stato progettato per offrire una grande stabilità anche quando il bambino, durante i trasferimenti, si appoggia sulla pedana.

Stabile e super resistente!



Arancio, verde, azzurro o lilla... che **colore** scegli per la tua Dory?

Imbottitura in espanso, morbida ma resistente e che non perde la sua elasticità anche dopo molti anni di attività...
e fodera nello **speciale tessuto OM**, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati),
particolarmente piacevole al tatto, in grado di mantenersi integro e
impermeabile anche dopo grandi sollecitazioni.



...e per **scrivere**?
Aggiungi il banco o!

Completa la tua Dory con il banco sagomato con incavo e bordino di contenimento, regolabile in altezza ed inclinazione in modo indipendente dalla seduta, che favorisce le attività dei bambini e li aiuta nella coordinazione.

Oppure scegli il tavolino trasparente applicabile direttamente ai braccioli (vedi alle pagine successive).





Tutti a
scuola!

Completa la tua Dory con...



la pedana...



e i fianchetti...



le pelotte
toracali...



e il
divaricatore...

Gli accessori

Dory è una seggiolina da scuola così regolabile che può adattarsi a tutti i bambini e con i suoi numerosi accessori è perfetta anche per i bimbi davvero speciali!

Puoi completare la tua Dory con:

una **prolunga schienale**;

fianchetti laterali per il contenimento del bacino;

una coppia di **pelotte** toracali;

un **divaricatore**;

una **pedana** poggipiedi regolabile in altezza, profondità e in flessione-estensione, dotata di ferma talloni;

4 **ruotine** gemellari e piroettanti con freno;

un **tavolino** ribaltabile trasparente da fissare sulla seduta, oppure un banco regolabile in altezza, indipendentemente dalla seduta.



la prolunga
schienale



e le
ruotine ...



il tavolino,



oppure il banco.

Un'informazione in più

Grazie alle sue peculiari caratteristiche di progettazione, Dory è una seduta che rientra nelle caratteristiche richieste dal Nomenclatore Tariffario per i seggioloni normali destinati ai bambini e ragazzi che hanno bisogno di una seduta personalizzata e controllata durante le attività ricreative o didattiche.

Dory può essere quindi prescritta tramite i seguenti codici D.M.332/99:

Dory seggiolone per bambini

DESCRIZIONE	Tariffe DM 332/99
Seggiolone per bambini e ragazzi che hanno bisogno di una seduta che possa essere personalizzata. L'altezza della seduta è regolabile, i braccioli ergonomici imbottiti regolabili in altezza, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in materiale lavabile. Può essere completata con numerosi accessori in relazione alle necessità del bambino	18.09.18.003 18.09.18.136 18.09.18.145
Prolunga/poggiatesta dello schienale, regolabile in altezza	18.09.18.127
Coppia supporti laterali per il tronco regolabili in larghezza altezza	18.09.18.118x2
Divaricatore imbottito regolabile in senso antero posteriore, estraibile	18.09.18.112
Pedana poggiapiedi regolabile in altezza e inclinazione (flesso estensione) dotata di cinturini fermapiede	18.09.18.130 18.09.18.109
Cinghia pettorale	18.09.18.103
Cinghia a bretellaggio imbottita	18.09.18.106

e per i casi più particolari...

Unità posturale per il capo regolabile in altezza, in inclinazione, in senso antero-posteriore, lateralmente.	18.09.39.027
Unità posturale per arto inferiore con appoggia piedi diviso, inclinabile, con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamento del singolo piede la regolazione dell'altezza, della divaricazione, della flessoestensione, della pronosupinazione.	18.09.39.036

Quando serve un aiuto speciale...

Dory è stata progettata per accogliere anche i bambini che hanno bisogno di un aiuto in più per partecipare alle attività della classe: la seggiolina può essere infatti completata con una serie di accessori che aiutano il bambino a mantenere la postura più adatta alle attività che vuole svolgere, facendolo sentire sicuro e adeguatamente contenuto, come tra le braccia della mamma.



Unità posturale per il capo

Per alcune situazioni il bambino può essere aiutato da un'unità posturale per il capo, che lo aiuta a mantenere la testa nella posizione più appropriata, permettendo anche ai bambini con scarso controllo di avere un buon coordinamento oculo-manuale: l'unità è infatti regolabile in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente per adattarsi alla posizione di cui ha più bisogno il bambino.



Poggia piedi regolabili singolarmente!



Unità posturale per arti inferiori

Una unità posturale per gli arti inferiori appositamente progettata per garantire gradi di contenimento differenti a seconda delle necessità del bambino, regolabile in altezza ed inclinazione, con poggia piedi diviso per posizionare indipendentemente i due piedini: con Dory il bambino si sente sicuro, ben appoggiato e pronto per dare sfogo a tutta la sua creatività!


Cinture toracali e pelviche

Quando il bambino ha bisogno di essere sorretto e mantenuto stabile sulla seduta, è possibile integrare Dory con una linea di cinture che consentono il contenimento puntuale del bacino e del tronco, senza comprimerli, e che lasciano il giusto grado di libertà al bambino a seconda dei suoi bisogni e capacità.




Le dimensioni

Seduta

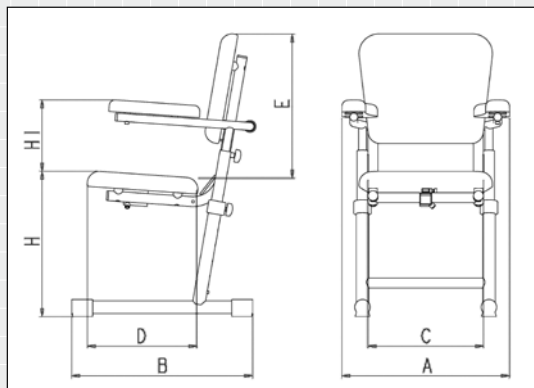


	RIFERIMENTI	MIS. 1	MIS. 2
	Codice prodotto	800001	800002
A	Larghezza	44	49
B	Lunghezza	46	52
C	Larghezza seduta	32	36
D	Profondità seduta	28	34
E	Altezza schienale	38	45
H	Altezza seduta/terra	36 - 52	36 - 52
H1	Altezza seduta/braccioli	12 - 21	12 - 21
	Età del bambino (anni)	4 - 8	7 - 12
	Altezza del bambino (cm)	104 - 126	121 - 150
	Peso (Kg)	8	9,5
	Portata Max (Kg)	30	45
Le misure sono espresse in centimetri			

Tavolino trasparente

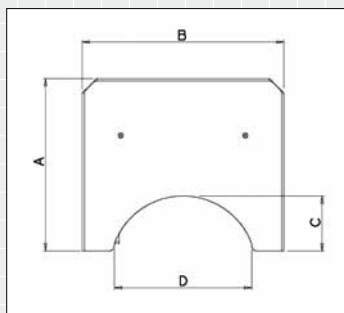

	RIFERIMENTI	MIS. UNICA
	Codice prodotto	800021
A	Profondità	47
B	Larghezza	55
C	Profondità incavo	15
D	Profondità incavo	37,5
Le misure sono espresse in centimetri		

Banco

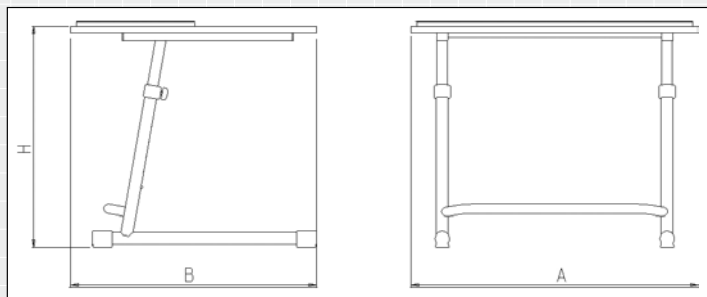

	RIFERIMENTI	MIS. 1
	Codice prodotto	800020
A	Larghezza	76,5
B	Lunghezza	65,5
H	Altezza seduta/terra	58,5 - 74,5
	Peso (Kg)	12,5
Le misure sono espresse in centimetri		



Richiedi il catalogo
OltreMorbido[®]
fumagalli 



fumagalli
WE TAKE CARE

Fumagalli srl
Piazza Puecher 2
22037 Ponte Lambro (CO)
Tel. (+39) 031 33 56 811
Fax (+39) 031 622 111
www.fumagalli.org