



Rediscover your life

www.gennymobility.it

Rediscover your life



CHI È GENNY™?

Genny 2.0 è un dispositivo per la mobilità altamente tecnologico che permette ad un gran numero di persone con disabilità di **muoversi con sicurezza in spazi precedentemente a loro inaccessibili**.

Genny utilizza una base auto-bilanciante Segway appositamente modificata ed adattata alle esigenze del caso, garantendo rotazioni immediate sullo stesso asse e l'avanzamento **senza necessità di azionare leve di comando** quali acceleratore e freno.

Una libertà ritrovata



Requisiti

Buona stabilità del busto

Mobilità sufficiente da poter inclinarsi leggermente in avanti o indietro


Forza negli arti superiori

Buona presa delle mani



Sistema auto-bilanciante Segway®

Le 2 ruote parallele, i numerosi sensori elettronici (tra cui **5 giroscopi**) permettono a Genny di muoversi spostando soltanto parte del proprio busto in avanti per avanzare, ed indietro per rallentare o frenare. Un semplice manubrio garantisce la rotazione del mezzo senza l'obbligo dell'uso specifico di entrambe le mani.

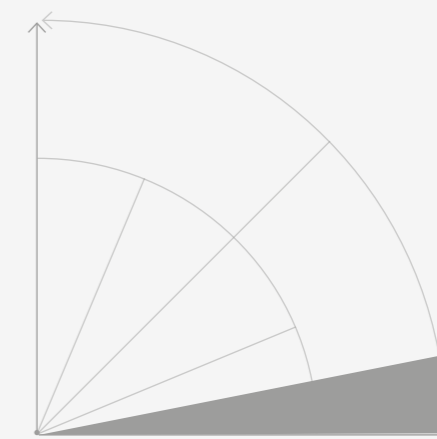

18%
Pendenza
superabile

3hp
Potenza

La disabilità è cambiata

Fino ad oggi non è mai esistito nulla di simile

Genny™ inaugura una nuova filosofia di trasporto per la mobilità personale. Grazie alla sua tecnologia auto-bilanciante permette di unire gli utilizzatori sotto il segno della libertà di movimento, annullando le differenze.

Chi utilizza le tradizionali sedie a rotelle sa bene quali problematiche si incontrino nel loro uso quotidiano.

Muoversi guardando sempre a terra per non rischiare il puntamento delle piccole rotelle anteriori negli avvallamenti ed avere sempre le mani occupate (spesso sporcandosi) può essere causa di quotidiana frustrazione. Mai ultimo il problema di quando piove, che obbliga l'utilizzatore a bagnarsi per l'impossibilità di tenere in mano un semplice ombrello o facendogli assumere spesso rischi quando deve affrontare terreni scivolosi, piccoli gradini o piccole discese. Genny™ risolve "istantaneamente" tutte queste problematiche.



Vantaggi

Poter tenere per mano la propria compagna/o mentre si passeggia è un'azione comune per chi cammina ma spesso impossibile per chi usa una sedia a rotelle. Genny™ ci permette, grazie alle sue incredibili doti di mobilità, di passeggiare guardando il paesaggio senza preoccuparci del fondo stradale e così, il poter mangiare un gelato o portare a spasso il proprio 'cucciolo' diventa oggi una realtà.

La fantasia è allo stato attuale l'unico limite alle potenzialità di Genny™: nulla sarà più precluso alla nostra immaginazione di mobilità. Lo sport, il tempo libero, il lavoro non saranno mai più come prima.



**Genny™ non è solo un mezzo
ma uno stile di vita**




**La felicità
non è data
dalla stazione eretta**



Nulla è lasciato al caso

Genny™ ha inserito la ridondanza anche nel suo sistema. In caso di anomalia o guasto di un componente elettronico, l'intervento di un secondo Segway contenuto al proprio interno garantisce una **fermata controllata** istantanea e sicura.

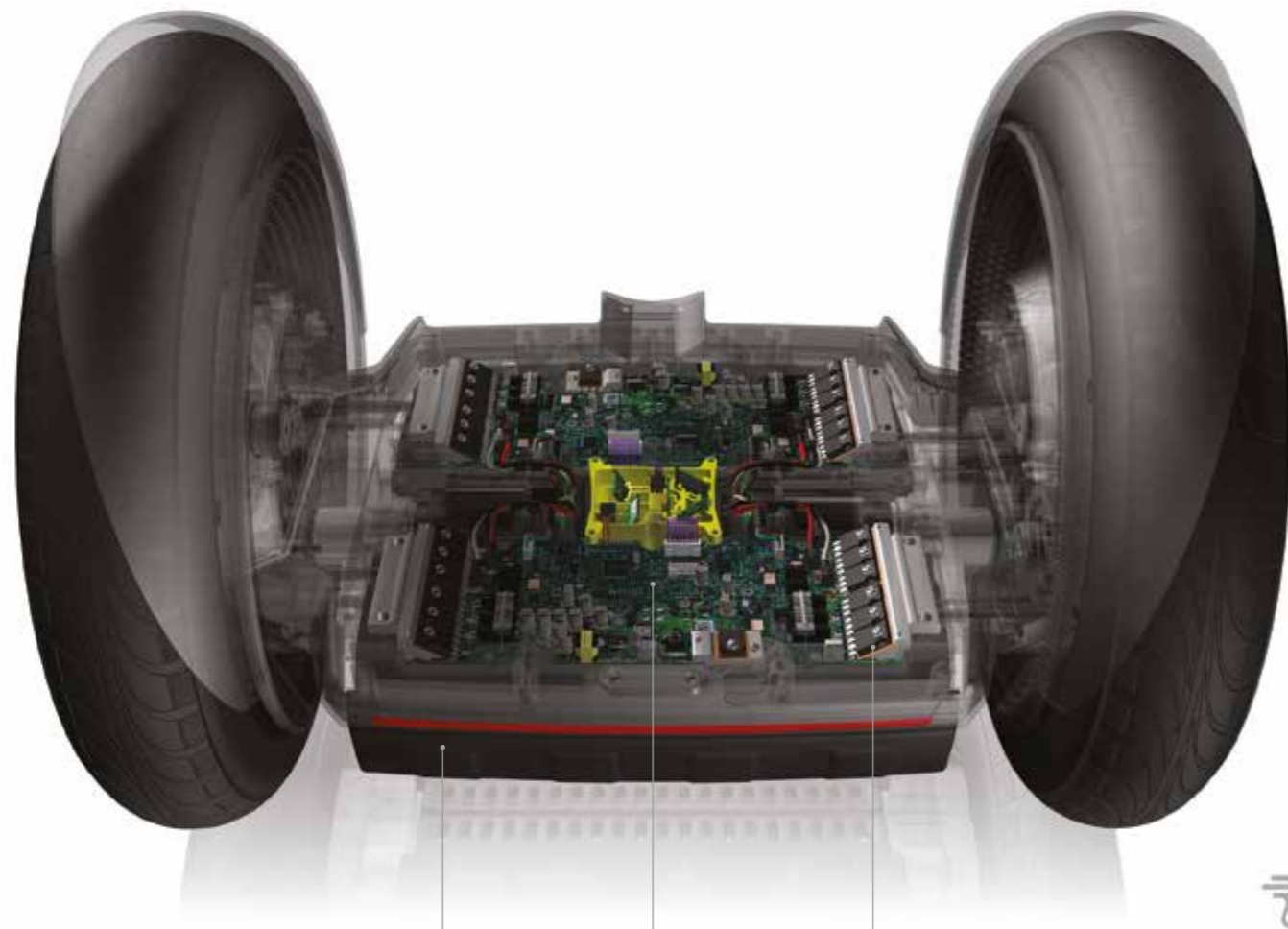

2x
Batterie al litio

2x
Schede
elettroniche

4x
Motori totali



Grande innovazione Ridotte dimensioni

Pensata anche per gli spazi interni

Lo schienale reclinabile e il manubrio estraibile con facilità, utilizzando una sola mano, riducono Genny™ ad un "cubo" di 67cm di lato e la rendono estremamente compatta ed adatta al trasporto.





Pulsantiera

La pulsantiera attiva/disattiva il comando di stazionamento e le luci (opzionali). Sul display è possibile consultare in ogni momento la carica della batteria.



Infokey

L'InfoKey controller wireless dà accesso a tutte le funzioni di Genny™.



Sistema di sicurezza

Le maniglie laterali, oltre a dare sostegno durante l'utilizzo e aiutare nel trasferimento da un'altra sedia, "se ribaltate" innescano il meccanismo di discesa dei piedini di sostegno in caso di emergenza.

Stazionamento

I due piedini permettono di stabilizzare la tua Genny™ in maniera semplice e sicura.



Luci anteriori*

Due gruppi ottici in policarbonato (disponibili in bianco e grigio) e copertura impermeabile in ABS posta su banda da sei LED.



Luci posteriori*

Un dispositivo LED illumina di rosso acceso la scritta Genny™ presente sul supporto schienale.

Schienale Tarta®

Pensato modularmente, con pochi semplici componenti molto resistenti, lo schienale Tarta® risponde a moltissime esigenze, da quelle estetiche per sedute di tendenza, alle problematiche più serie dei diversamente abili. Tutti possono beneficiare di questa innovativa soluzione.



*Il kit luci è venduto separatamente



GENNY 2.0

Genny 2.0 utilizza una base auto-bilanciante Segway appositamente modificata ed adattata alle esigenze del caso, garantendo rotazioni immediate sullo stesso asse e l'avanzamento senza necessità di azionare leve di comando quali acceleratore e freno.

Dati tecnici*

Larghezza	630 mm
Altezza seduta	670 mm
Profondità	760 mm
Altezza dal terreno	100 mm
Peso	89,5 kg
Capacità di carico	95 kg
Velocità	6/12 Km/h
Autonomia	15 - 25 km**

Colorazioni



* Per ulteriori informazioni consultare pagina 18

** A seconda dello stile di guida e del fondo stradale



KIT XROAD*

Costruito per ampliare gli orizzonti. Il nuovo Kit ci permette di sondare con facilità ogni genere di terreno, dalla neve alla sabbia, dalla ghiaia al fango. Non avrai più limiti: immagina un luogo, prendi Genny™ e raggiungilo.

Con lo speciale Kit XR avrai praticità e comodità al tuo servizio.

In pochi minuti potrai convertire la tua Genny™ Urban in configurazione off road, con il bello della reversibilità in qualsiasi momento.

* Il kit comprende passaruota, parafango interno, pneumatici da fuoristrada e cerchi

** Per ulteriori informazioni consultare pagina 18



*** Peso complessivo di una Genny™ 2.0 equipaggiata con il kit XRoad

Dati tecnici**

Larghezza	830 mm
Altezza seduta	690 mm
Profondità	760 mm
Altezza dal terreno	120 mm
Peso	105 kg***

Colorazioni



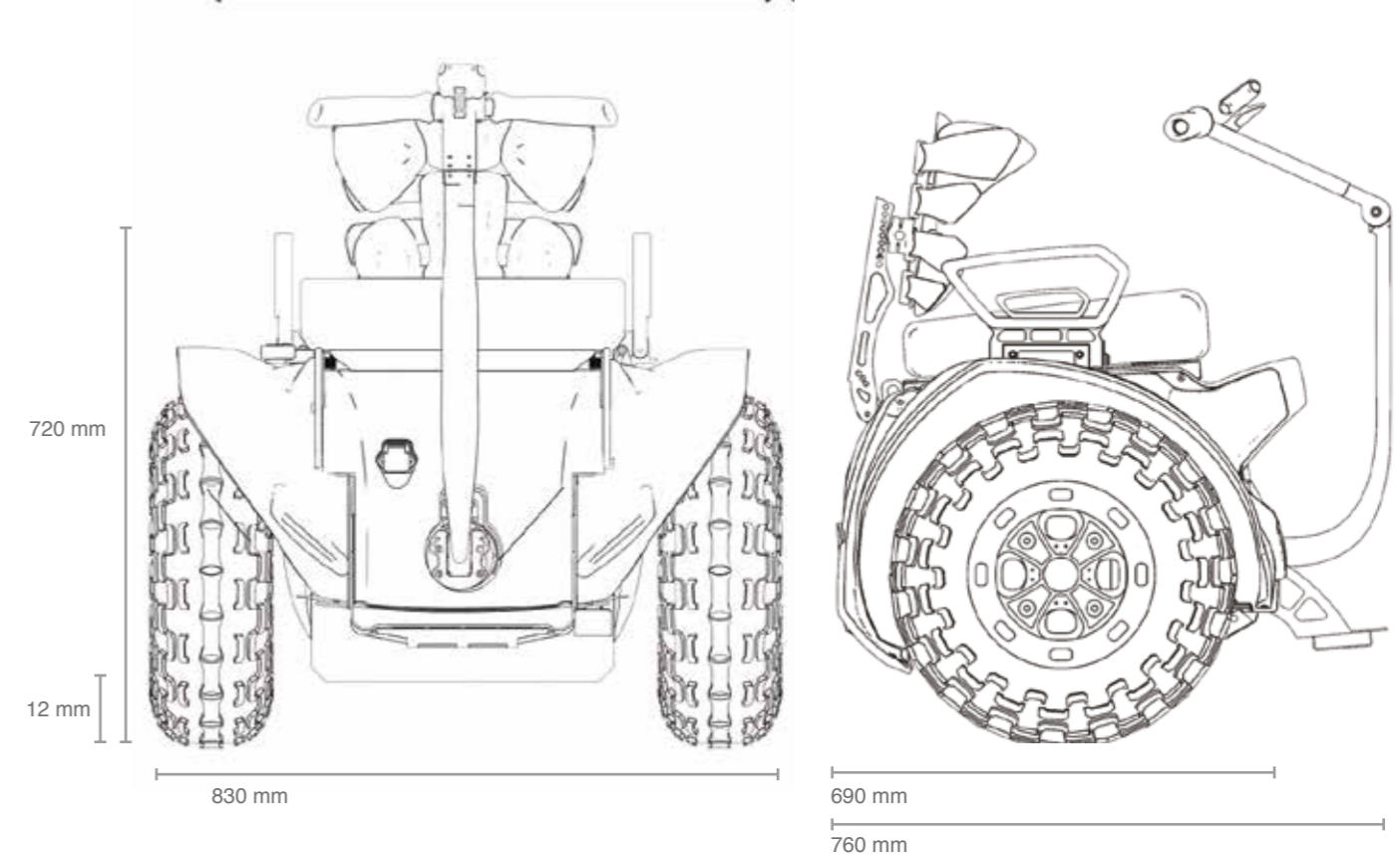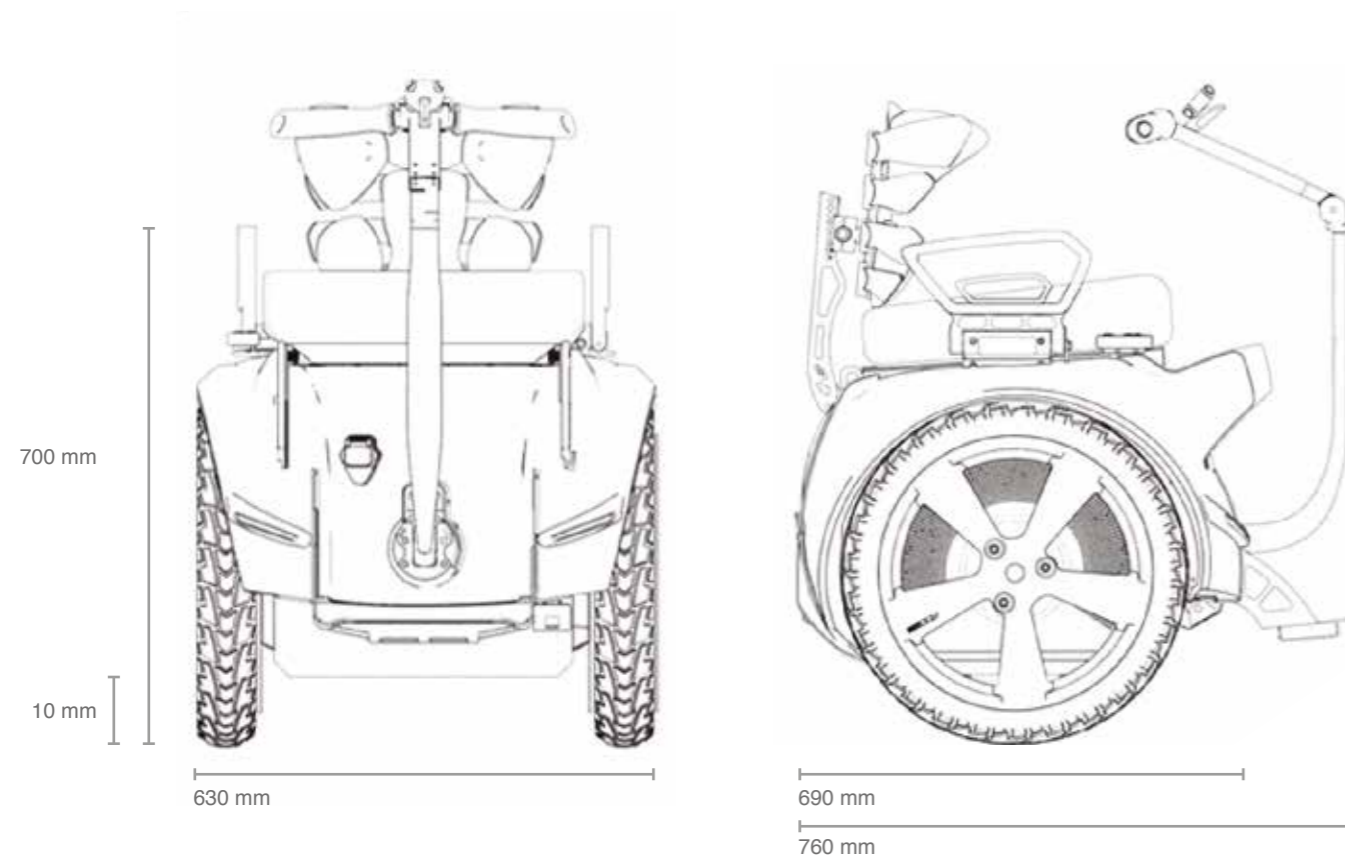

Genny™ 2.0

Base autobilanciante Segway®	●
Schienale Tarta®	●
Cuscino in memory foam	●
2 Infokey®	●
Sterzo in acciaio	●
Pneumatici ad aderenza migliorata	●
Cerchi in polimero Segway®	●
2 batterie al litio	●
Carica batterie	●
Pulsantiera lato sinistro	○
Cerchi in lega	○
Kit luci (anteriore e posteriore)	○
Sterzo in fibra di carbonio	○

Kit XRoad

Carene laterali	●
Pneumatici Off Road	●
Cerchi in lega	●
Carena frontale e posteriore	○
Kit luci (anteriore e posteriore)	○

● Di serie
○ Optional

GM DISTRIBUTION S.R.L. A SOCIO UNICO
PIAZZA VELASCA, 5 - 20122 MILANO (MI)
P.IVA / CF: 07613180962



GENNY POINT ITALIA

SAVONA

VIA GUIDOBONO 137 R - 17100 - SAVONA
TEL. 019 806680
savona@gennymobility.it

MILANO

VIA PAGANO 4 - 20145 - MILANO
TEL. 02 34599399
milano@gennymobility.it

ROMA

VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 33 - 00153 - ROMA
TEL. 06 91511141
roma@gennymobility.it

PORTO POTENZA PICENA

VIA PERGOLESÌ 44 - 62018 - PORTO POTENZA PICENA
TEL. 3894649424
portopotenza@gennymobility.it

www.gennymobility.it



Italian design

Swiss precision



Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all'Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche e regole di utilizzo. Tutte le indicazioni relative agli accessori e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l'autorizzazione scritta di GM Distribution S.r.l. a socio unico.